




**Manual de Uso de Equipo**  
**ZAPCT014**

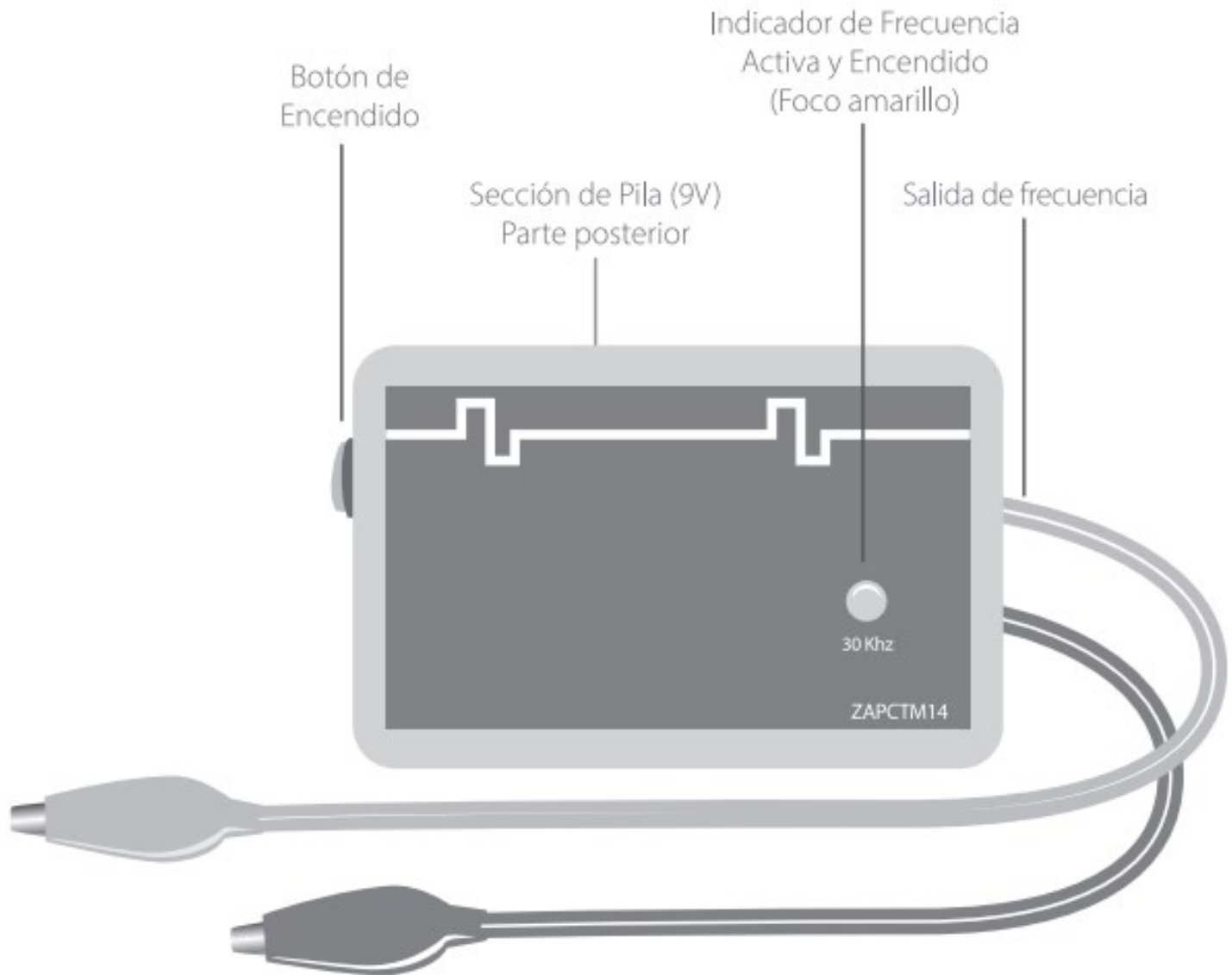

**(Figura 1)**

## CONDICIONES DE TRABAJO

El funcionamiento del sistema está garantizado en un entorno de trabajo idóneo, asegúrese de NO usarse en personas con marcapasos y mujeres embarazadas.

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

La salida de voltaje es de 9v, con una corriente que depende de la resistencia de cada persona. La frecuencia es variada dependiendo de la selección del usuario.

## RECOMENDACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

(Vea figura 1)

1. Encuentre un lugar limpio.
2. Aleje el aparato de cualquier fuente de vibración o impacto.
3. Suficiente ventilación.
4. Manténgalo fuera del alcance de fuertes campos magnéticos producidos por dispositivos eléctricos (Aparatos de aire acondicionado, ventiladores de gran tamaño, motores eléctricos de gran potencia, refrigeradores, etc.)
5. El acceso, reparación y cualquier manejo de los circuitos de la fuente de alimentación se encuentra limitado al usuario por medio de la estructura del dispositivo, para evitar daño al equipo no acceda a ésta área y diríjase al personal técnico calificado
6. En la parte lateral derecha del dispositivo se encuentra el interruptor de encendido y la salida de señal de Frecuencia Activa.

**Nota:** El dispositivo NO está programado para apagarse automáticamente después de un tiempo, debido a que su uso es con base al tiempo que determina el usuario para terminar una terapia. Si deja encendido el interruptor se descargará la batería. Use solo baterías de 9V cuadradas y alcalinas. También puede usar batería cuadrada recargable.



(Figura 2)

## MODO DE USO

(Vea figura 2)

Para encender o apagar el dispositivo utiliza el interruptor que se encuentra en la parte lateral (Ver figura 1). Una vez encendido el dispositivo, prenderá el foco rojo, y estará enviando la frecuencia.

Antes de iniciar cualquier sesión o terapia de *zappeo* coloque los tubos o accesorios al paciente. **No olvide poner una servilleta o gasa húmeda entre la terminal metálica y la mano del paciente.**

El tiempo estimado de cada sesión lo determina el usuario más no debe exceder los 7 minutos (min). Regularmente se emplea un método de 3 sesiones con una duración de 7min., y 20 min. de descanso entre cada sesión.

**Sólo puede aplicar hasta 3 tratamientos diarios.**

La frecuencia del aparato se denomina: técnica Clark, la cual es una frecuencia de 30 (Kilohertz) Khz

## INICIANDO UNA TERAPIA O SESIÓN

Antes de iniciar una terapia o sesión

Coloque los tubos con la servilleta o gasa húmeda al paciente para estar conectado a la "frecuencia activa". Una vez que haya verificado la correcta conexión de los cables encienda el equipo.

Una vez terminado el tiempo de sesión establecido para la terapia o la sesión apague el equipo.

Solo podrá retirar los tubos al paciente cuando haya apagado el equipo.

**Nota:** Nunca junte los tubos cuando el equipo este encendido, producirá un corto circuito y dañará el dispositivo.



**Accesorio  
opcional  
pulseras**

**Se sujetan a los  
caimanes del  
equipo.**

**(Figura 3)**



**Accesorio Tubo  
de cobre**

**(pueden usarse de  
3 a 5 pulgadas)**

**Se sujetan a los  
caimanes del  
equipo.**

**(Figura 4)**



**RIESGO  
INDETERMINADO**

## **PRECAUCIÓN**

**NO SE USE EN PERSONAS CON MARCAPASOS  
O QUE TENGAN EN SU CUERPO APARATOS ELECTRÓNICOS.**

**NO SE USEN RELOJES O EQUIPOS ELECTRÓNICOS PUESTOS DURANTE LA TERAPIA.  
EN TODAS LAS SESIONES EN LAS QUE SE APLIQUE LA SEÑAL ACTIVA  
ES INDISPENSABLE Y NECESARIO EL USO DE UNA SERVILLETA DOBLADA,  
GASA, VENDA U ALGODÓN (CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES QUE UTILICE  
DEBERÁ ESTAR HÚMEDO(A) Y TENER LOS DOBLECES NECESARIOS PARA EVITAR  
UNA QUEMADURA) ENTRE LA TERMINAL METÁLICA DE LA PULSERA Y LA PIEL,  
PARA QUE HAYA CONDUCTIVIDAD Y EVITAR UN ARCO ELÉCTRICO QUE  
OCASIONE QUEMADURAS.**

El uso de las Pulseras debe ser único (un par por persona).  
Según las Normas de Salud, y para evitar algún contagio involuntario.  
Evite ser sancionado por el Instituto de Salud de su Estado.